

Gebrauchsanweisung

VENOray

Instructions for Use



1 Verwendungszweck

Der Venoray ist eine tragbare LED-Lichtquelle zum Lokalisieren von Blutgefäßen in den Gliedmaßen von Frühgeborenen, Säuglingen und Kleinkindern.

2 Grundlegende Hinweise



Der Venoray besteht aus Polyamid, frei von Latex, DEHP und BPA.



Reinigung mit einem milden Desinfektionsmittel nach Reinigungsanweisung des Desinfektionsmittelherstellers.



Batteriebetrieben 2 x AAA



Vor Gebrauch auf Beschädigung und Funktionalität prüfen.



Nur für den klinischen Gebrauch.



Anwendung nur an Extremitäten.



Einsatz nur für kurzzeitigen Hautkontakt.



Nicht direkt in die Lichtquelle blicken oder diese auf den Kopf des Patienten richten. Hinweis: Kann zu Einschränkung des Sehvermögens führen.



Treten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auf, dann melden Sie diese bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde.



Nicht steriles Medizinprodukt.



Trocken aufbewahren.



Der Venoray besteht aus Polyamid, frei von Latex, DEHP und BPA.

1 Intended Use

The Venoray is a portable LED light source for locating blood vessels in the extremities of premature babies, infants and young children.

2 Basic information



The Venoray is made from polyamide and contains no Latex, DEHP or BPA.



Clean with a mild disinfectant, following the cleaning instructions of the disinfectant manufacturer.



Requires 2 x AAA batteries



Check for damage and proper functionality before use.



Only for clinical use.



Only use on extremities.



Not for prolonged contact with the skin.



Do not look directly into the light source or direct it at the patient's head. Note: this can lead to impaired vision.



If serious incidents occur in connection with the product, please report these to the manufacturer and the responsible authorities.



Non-sterile medical device.




Store in a dry location.



The Venoray is made from polyamide and contains no Latex, DEHP or BPA.

3

Anwendung

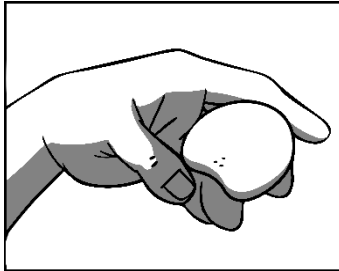

Positionieren Sie die Säuglingshand an der Außenkante des Venoray über den LEDs.

Dabei lassen sich die Finger über die Kante fixieren.

Straffen Sie die Haut des Handrückens mit Daumen und Zeigefinger.

3

Application



Place the infant's hand on the outside edge of the Venoray, over the LEDs.

The fingers can then be secured over the edge.

Tighten the skin on the back of the hand using your thumb and forefinger.

4

Entsorgung

Leere Batterien nach Herstellerangaben entsorgen.

Defektes Gerät im klinischen Abfall entsorgen.

4

Disposal

Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

If the device is defective, dispose of it as clinical waste.