

Instrukcja użytkowania

VENOray

Instruções de utilização



1 Przeznaczenie

Venoray to przenośne źródło światła LED do lokalizacji naczyń krwionośnych w kończynach wcześniaków, niemowląt i małych dzieci.

2 Podstawowe wskazówki



Venoray jest wykonany z poliamidu, nie zawiera lateksu, DEHP i BPA.



Czyścić łagodnym środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją czyszczenia producenta środka dezynfekującego.



Zasilanie za pomocą 2 baterii AAA



Przed użyciem sprawdzić pod kątem uszkodzeń i prawidłowego działania.



Wyłącznie do użytku klinicznego.



Stosować tylko na kończynach.



Stosować tylko do krótkotrwałego kontaktu ze skórą.



Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła ani kierować go na głowę pacjenta. Uwaga: może powodować ograniczenie zdolności widzenia.



Jeżeli w związku z produktem wystąpią poważne incydenty, należy je zgłosić producentowi i właściwym władzom.



Niesterylny wyrób medyczny.



Przechowywać w suchym miejscu.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

1 Utilização prevista

O Venoray é uma fonte de luz de LED portátil para a localização de vasos sanguíneos nos membros de bebés prematuros, lactentes e crianças de tenra idade.

2 Instruções básicas



O Venoray é feito em poliamida, isento de látex, DEHP e PBA.



Limpeza com um desinfetante suave, conforme instruções de limpeza do fabricante do desinfetante.



Funciona a pilhas 2 x AAA



Verificar quanto a danos e funcionalidade antes de usar.



Apenas para uso clínico.



Aplicação apenas nas extremidades.



Utilização apenas para um contacto breve com a pele.



Não olhar diretamente para a fonte de luz ou apontar a mesma para a cabeça do paciente. Observação: pode levar à limitação da capacidade visual.



No caso de ocorrerem incidentes graves relacionados com o produto, é favor comunicar os mesmos ao fabricante e à autoridade competente.




Dispositivo médico não estéril.



Guardar em local seco.

Guardar à temperatura ambiente.

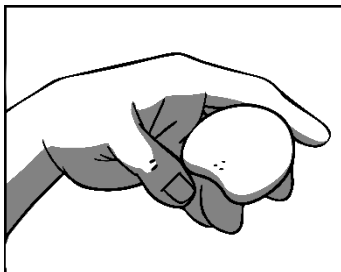

Ułożyć dłoń niemowlęcia na zewnętrznej krawędzi Venoray nad diodami LED.

Palce pacjenta można przy tym umieścić za krawędzią.

Naciągnąć skórę grzbietu dłoni kciukiem i palcem wskazującym.



Posicione a mão do lactente na ponta exterior do Venoray, sobre os LED.

Neste caso é possível fixar os dedos por cima da aresta.

Estique a pele das costas da mão com o polegar e o indicador.

Utylizacja

Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Uszkodzone urządzenie wyrzucić do odpadów klinicznych.

Eliminação

Eliminar as pilhas gastas de acordo com as instruções do fabricante.

Dispositivo defeituoso deve ser eliminado junto com lixo clínico.