

TCmatt NEOsingle TCmatt NEOmulti



Instructions for Use

Čeština

Návod k použití

TCmatt NEOsingle / Jednorázová podložka

TCmatt NEOmulti / opakovaně použitelná matrace

Účel použití

Matrace slouží k celotělové regulaci teploty pacientů, zejména novorozenců a kojenců. Pomocí hadicové soupravy se připojuje k systému TECOtherm® pro řízenou hypo-/hypertermii, kterým je průběžně naplňována temperační kapalina. Pro zvýšení účinnosti regulace tělesné teploty může být matrace podle potřeby ovinuta kolem těla a upevněna pásky pomocí oček.

Upozornění a bezpečnostní opatření



Pouze ke klinickému použití.



V případě výskytu závažných incidentů v souvislosti s tímto výrobkem prosím kontaktujte výrobce a příslušný úřad.



Matraci lze používat výhradně jako příslušenství systému TECOtherm® pro řízenou hypo-/hypertermii!



Tato matrace je jediná matrace schválená výrobcem systému TECOtherm® pro hypo-/hypertermii.



Zejména u novorozenců je třeba zabránit přímému kontaktu matrace s pokožkou pacienta. Na matraci je nutné použít vodoodpudivou, klinicky čistou krycí textilii.



Dbejte pokynů pro správné čištění výrobku uvedených v kapitole Čištění.



Pro správné použití matrace se řiďte návodem k použití systému TECOtherm® pro řízenou hypo-/hypertermii!



Chraňte před ostrými předměty – hrozí riziko poškození.



Nejedná se o sterilní zdravotnický prostředek.



Tato matrace je určena k jednorázovému použití! Nesmí být znovu zpracována ani znovu použita!



Před použitím zkontrolujte, zda matrace není poškozená. V případě poškozeného obalu ji zlikvidujte.

Symbyly



Zdravotnický prostředek



Chraňte před slunečním světlem



Výrobce



Označení šarže



Použitelné do



Katalogové číslo




Skladujte na suchém místě



Skladovat při pokojové teplotě

Použití

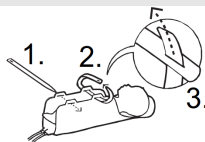

1. Umístěte dítě doprostřed matrace. Popruhy na obou stranách provlékněte určenými oky v matraci.
2. Stáhněte oba konce popruhů k sobě tak, aby se matrace kolem dítěte uzavřela.
3. Zasuňte úzký, do špičky zužující se konec popruhů do určených ok na druhém konci popruhů. Konec zcela protáhněte, dokud není matrace uzavřena a zajištěna.

Čištění

Dodržujte hygienické a dekontaminační předpisy v souladu s národními požadavky a interními předpisy zdravotnického zařízení.

Je nutné používat národně schválené a k reprocesu vhodné povrchové dezinfekční prostředky se širokospektrálním účinkem.

Před a po každém použití očistěte matraci a hadicové přípojky bezvláknovou utěrkou a jemným, bezbarvým povrchovým dezinfekčním prostředkem se širokospektrálním účinkem na bázi alkoholu (např. Bacillol) podle pokynů výrobce. Hrubé nečistoty odstraňte předem. Pokud zůstanou zbytky nečistot, postup čištění zopakujte.

Jednorázové použití – matraci nečistit!

Skladování

Skladujte na suchém a tmavém místě při pokojové teplotě.

Likvidace

Po uplynutí doby použitelnosti zlikvidujte jako klinický odpad.

Po jednorázovém použití zlikvidujte jako klinický odpad.

Vlastnosti výrobku

Materiál:	Polyuretan
	Polyuretan/polyester
Vstupní/výstupní hadička:	Polyuretan
Připojovací konektor:	Acetal
Maximální tlak:	500 mbar
Velikost:	44 cm x 72 cm
Objednací číslo a název produktu:	642 68 01 / TCmatt NEOmulti
	642 74 01 / TCmatt NEOsingle
Hmotnost:	0.21 kg



Návod k použití v národním jazyce najdete na adrese: www.service.tcm.gmbh/ifus/



Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiuate internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal
Deutschland
Tel.: +49 345 120 52 04
www.tcm.gmbh