

TCmatt NEOsingle **TCmatt NEOmulti**



Instructions for Use

Dansk

Brugsanvisning

TCmatt NEOsingle / envejsmåtte

TCmatt NEOmulti / måtte til flergangsbrug

Anvendelsesformål

Måtten bruges til temperaturstyring af patientens, især nyfødtes og spædbørns, krop. Måtten tilsluttes via slangesættet på TECO-therm® Hypo-/Hyperthermiesystem og gennemstrømmes med tempereringsvæske. Hvis der er behov for det, kan måtten vikles rundt om kroppen og lukkes vha. båndene i øskerne for at forbedre patientens temperering.

Advarselsanvisninger og sikkerhedsforanstaltninger



Kun egnet til klinisk brug.



Kontakt producenten og den ansvarlige myndighed, hvis der i sammenhæng med produktet opstår alvorlige situationer.



Måtten må kun bruges som tilhører til TECOtherm® – system til hypo-/hypertermi!



Denne måtte er den eneste måtte, der er godkendt af producenten af TECOtherm® Hypo-/Hyperthermiesystem.



Navnlig ved nyfødte er det vigtigt, at måtten ikke har direkte kontakt med patientens hud. På måtten skal der anbringes et vandafvisende, klinisk rent afdekningsklæde.



Vær opmærksom på anvisningerne vedrørende fagmæssig korrekt rengøring af produktet i kapitel Rengøring.



Læs brugsanvisningen til TECOtherm® – system til hypo-/hypertermi for den korrekte anvendelse af måtten!



Holdes på afstand af skarpe genstande. Fare for Beskadigelse.



Produktet er ikke et sterilt medicinsk produkt.



Måtten er et produkt, der er beregnet til engangsbrug! Den må ikke genbruges eller bruges en anden gang!



Kontroller for beskadigelse inden anvendelsen, bortskaf produktet ved beskadiget emballage.

Symboler



Medicinsk produkt



Beskyttes mod sollys



Producent



Batchnummer



Holdbart til



Katalognummer




Opbevares tørt



Opbevares ved stuetemperatur

X	X
	X
	X
	X
X	
X	X
	X
X	
	X
X	
X	X
X	X
X	X
X	X
	X
X	
X	X

Anvendelse

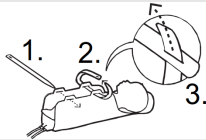

1. Sæt barnet midt på måtten. Før båndene på begge sider gennem øjerne i måtten.
2. Træk båndenes ender sammen, så måtten lukker sig omkring barnet.
3. Skub den smalle, tilspidsede side af båndene gennem øjerne i den anden ende af båndene. Træk spidsen helt igennem, indtil måtten er lukket og fastgjort.

Rengøring

Hygiejne- og klargøringsforskrifter skal overholdes i henhold til nationale og institutionsspecifikke angivelser.

Nationalt godkendte overflade-desinfektionsmidler med bred anvendelsesmulighed skal anvendes.

Før og efter hver anvendelse skal måtten og slangetilslutningerne rengøres med en frugfri klud og et mildt, farveløst overflade-desinfektionsmiddel på alkoholbasis (eksempelvis Bacillol) i henhold til producentens angivelser. Grove urenheder skal fjernes først. Ved tilbageblevne urenheder gentages rengøringen.

Engangsbrug, rengør ikke måtten!

Opbevaring

Opbevares tørt og mørkt ved stuetemperatur.

Bortskaffelse

Skal bortskaffes som klinisk affald, når udløbsdatoen er nået.

Bør efter engangsbrug bortskaffes som klinisk affald.

Produktegenskaber

Materiale:	Polyurethan
	Polyurethan / Polyester
Indtags-/udtagsslange:	Polyurethan
Tilslutningsstik:	Acetal
Maksimalt tryk:	500 mbar
Størrelse:	44 cm x 72 cm
Varenummer og produktnavn:	642 68 01 / TCmatt NEOmulti
	642 74 01 / TCmatt NEOsingle
Vægt:	0.21 kg

DA



En online brugsanvisning på dansk findes på: www.service.tcm.gmbh/ifu/



Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiuate internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal
Deutschland
Tel.: +49 345 120 52 04
www.tcm.gmbh