

# **TCmatt NEOsingle** **TCmatt NEOmulti**



## **Instructions for Use**

Deutsch

# Gebrauchsanweisung

## TCmatt NEOsingle / Einwegmatte

## TCmatt NEOmulti / Mehrwegmatte

### Zweckbestimmung

Die Matte dient der Ganzkörper-Temperierung von Patienten, insbesondere von Neugeborenen und Säuglingen. Sie wird über die Schlauchgarnitur am TECOthern® Hypo-/ Hyperthermiesystem angeschlossen und mit Temperierflüssigkeit durchströmt. Um die Temperierung des Patienten zu verbessern, kann eine Matte bei Bedarf um den Körper gehüllt und mit Bändern an den Ösen verschlossen werden.

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen



Nur für den klinischen Gebrauch.



Treten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auf, dann melden Sie diese bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde.



Die Matte darf ausschließlich als Zubehör des TECOthern® Hypo-/ Hyperthermiesystem eingesetzt werden!



Diese Matte ist die einzige vom Hersteller des TECOthern® Hypo-/ Hyperthermiesystem freigegebene Matte.



Insbesondere bei Neugeborenen sollte ein direkter Kontakt der Matte mit der Haut des Patienten vermieden werden. Auf der Matte ist ein wasserabweisendes, klinisch reines Abdecktuch zu verwenden.



Bitte beachten Sie die Hinweise zur sachgemäßen Reinigung des Produkts im Kapitel Reinigung.



Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des TECOthern® Hypo-/ Hyperthermiesystem für die korrekte Anwendung der Matte!



Von scharfen Gegenständen fernhalten, Beschädigungsgefahr.



Nicht steriles Medizinprodukt.



Es handelt sich bei dieser Matte um ein Produkt für den Einmalgebrauch! Es darf weder wiederaufbereitet noch ein zweites Mal verwendet werden!



Vor der Verwendung auf Beschädigung prüfen, bei beschädigter Verpackung verwerfen.

### Symbole



Medizinprodukt



Vor Sonnenlicht schützen



Hersteller



Chargenbezeichnung



Verwendbar bis



Katalognummer




Trocken aufbewahren



Bei Raumtemperatur lagern

## Anwendung

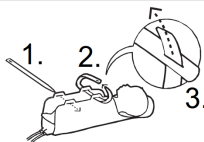

1. Platzieren Sie das Kind mittig auf der Matte. Führen Sie die Bänder auf beiden Seiten durch die dafür vorgesehenen Ösen in der Matte.
2. Ziehen Sie beide Enden der Bänder zusammen, sodass sich die Matte um das Kind schließt.
3. Schieben Sie die schmale, spitz zulaufende Seite der Bänder durch die dafür vorgesehenen Ösen am anderen Ende der Bänder. Ziehen Sie die Spitze vollständig durch, bis die Matte geschlossen und fixiert ist.

## Reinigung

Die Hygiene- und Aufbereitungsvorschriften sind entsprechend nationaler und einrichtungsspezifischer Vorgaben einzuhalten.

Es müssen national zugelassene und zur Aufbereitung geeignete Flächendesinfektionsmittel mit Breitbandwirkung verwendet werden.

Vor und nach jeder Anwendung sind die Matte und die Schlauchanschlüsse mit einem fusselfreien Tuch und einem milden, farblosen Flächendesinfektionsmittel mit Breitbandwirkung auf Alkoholbasis (beispielsweise Bacillol) entsprechend den Herstellerangaben zu reinigen. Vorab sind grobe Verunreinigungen zu entfernen. Bei verbleibenden Verunreinigungen ist die Reinigung zu wiederholen.

Einmalgebrauch, die Matte nicht reinigen!

## Lagerung

Trocken und dunkel lagern bei Raumtemperatur.

## Entsorgung

Nach Ablauf der Verwendbarkeit als klinischen Abfall entsorgen.

Nach Einmalgebrauch als klinischen Abfall entsorgen.

## Produkteigenschaften

Material:	Polyurethan
	Polyurethan / Polyester
Einlass-/Auslassschlauch:	Polyurethan
Anschlusstecker:	Acetal
Maximaler Druck:	500 mbar
Größe:	44 cm x 72 cm
Artikelnummer und Produktname:	642 68 01 / TCmatt NEOmulti
	642 74 01 / TCmatt NEOsingle
Gewicht:	0.21 kg



Die Gebrauchsanweisung in Ihrer Landessprache finden Sie Online unter: [www.service.tcm.gmbh/ifus/](http://www.service.tcm.gmbh/ifus/)



Distributor  
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiuate internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/





Tec Com Medizintechnik GmbH  
Am Krümmling 1  
06184 Kabelsketal  
Deutschland  
Tel.: +49 345 120 52 04  
[www.tcm.gmbh](http://www.tcm.gmbh)