

TCmatt NEOsingle TCmatt NEOmulti



Instructions for Use

Español

Instrucciones de uso

TCmatt NEOsingle / manta desechable

TCmatt NEOmulti / manta reutilizable

Uso previsto

Esta manta se emplea para regular la temperatura corporal de los pacientes, en particular de recién nacidos y lactantes. Se conecta al sistema TECOTherm® de hipo-/hipertermia mediante el juego de mangueras y se atraviesa con un fluido de regulación térmica. Para mejorar el control de la temperatura del paciente, si fuese necesario, la manta puede envolverse alrededor del cuerpo y cerrarse introduciendo las cintas en las argollas.

Advertencias y medidas de precaución



Solo para uso clínico.



Si se produjeran incidentes graves en relación con el producto, le rogamos que lo notifique al fabricante y a la autoridad competente.



Esta manta debe emplearse exclusivamente como accesorio del sistema TECOTherm® de hipo-/hipertermia.



Esta manta es la única aprobada por el fabricante del sistema termorregulador de hipo/hipertemia TECOTherm® NEO.



Especialmente en el caso de recién nacidos, se debe evitar el contacto directo de la manta con la piel del paciente. Se debe usar un paño impermeable y desinfectado sobre la manta.



Tenga en cuenta las instrucciones sobre limpieza adecuada del producto recogidas en el apartado Limpieza.



Observe las instrucciones de uso del sistema TECOTherm® de hipo-/hipertermia para una correcta aplicación de la manta.



Mantener alejado de objetos punzantes, ya que podría dañarse.



Producto sanitario no esterilizado.



Esta manta es un producto de un único uso. No debe reciclarse ni emplearse una segunda vez.



Comprobar posibles daños antes de su uso, tirar si el embalaje está dañado.

Símbolos



Dispositivo médico



Proteger de la luz solar



Fabricante



Denominación de lote



Fecha de caducidad



Número de catálogo




Mantener en un lugar seco



Almacenar a temperatura ambiente

X	X
	X
	X
	X
X	
X	X
	X
X	
	X
X	
X	
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X

Aplicación

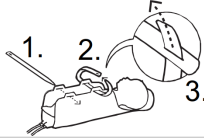

1. Coloque al niño en el centro de la manta. Pase las correas de ambos lados por los ojales dispuesto en la manta.
2. Una ambos extremos de las correas de manera que la manta quede cerrada alrededor del niño.
3. Pase el extremo estrecho y puntiagudo de las correas por los ojales del otro extremo. Tire de la punta completamente hasta que la manta quede cerrada y fija.

Limpieza

Las normas de higiene y procesamiento deben aplicarse de acuerdo con los requisitos nacionales y específicos del centro.

Se deben utilizar desinfectantes de superficies adecuados y aprobados a nivel nacional con un amplio espectro de acción.

Antes y después de cada uso, limpie la manta y las conexiones de tubos con un paño sin pelusas y un desinfectante para superficies suave, incoloro y a base de alcohol y con un amplio espectro de acción (por ej., Bacillol), siguiendo siempre las instrucciones del fabricante. Elimine siempre la suciedad gruesa en primer lugar. En caso de que no se haya eliminado la suciedad por completo, repita el proceso de limpieza.

De un solo uso: la manta no debe limpiarse.

Almacenamiento

Conservar seco, en un lugar oscuro y a temperatura ambiente.

Eliminación

Desechar como residuo sanitario cuando ya no sea útil.

Eliminar como residuo clínico una vez usada.

Características del producto

Material: poliuretano

poliuretano/poliéster

Entrada/salida del tubo: poliuretano

Clavija de conexión: acetal

Presión máxima: 500 mbar

Tamaño: 44 cm x 72 cm

Número de artículo y nombre del producto: 642 68 01 / TCmatt NEOmulti

642 74 01 / TCmatt NEOsingle

Peso: 0.21 kg

ES



Puede consultar las instrucciones de uso en su idioma online en: www.service.tcm.gmbh/ifus/



Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiata internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal
Deutschland
Tel.: +49 345 120 52 04
www.tcm.gmbh