

TCmatt NEOsingle **TCmatt NEOmulti**



Instructions for Use

Eesti

Kasutusjuhend

TCmatt NEOsingle / Ühekordselt kasutatava mati

TCmatt NEOmulti / Korduvkasutatava mati

Sihtotstarve

Matt on kasutusel patsientide, eelkõige vastsündinute ja imikute kogu keha tempereerimiseks. See ühendatakse voolikukomplekti kaudu hüpo-/hüpertermia süsteemi TECOtherm® külge ja sellest voolab tempereerimisvedelik läbi. Selleks et patsiendi tempereerimist parendada, võib mati vajaduse korral ümber keha mähkida ja paelte abil aasade külge sulgeda.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud



Ainult kliinilise kasutamise jaoks.



Kui ühenduses tootega tõsised ohuohutumeid esineb, siis teatage palun nendest tootjale ja pädevale ametkonnale.



Matti tohib rakendada eranditult hüpo-/hüpertermia süsteemi TECOtherm® tarvikuna!



See matt on ainus hüpo-/hüpertermia süsteemi TECOtherm® tootja käest kasutusloa saanud matt.



Eelkõige vastsündinute puhul tuleb vältida mati otsest kokkupuudet patsiendi nahaga. Mati peal tuleb kasutada vett-hülgavat, kliiniliselt puhast kattelina.



Palun järgige juhiseid toote asjakohase puhastamise kohta peatükist Puhastamine.



Järgige mati korrektse rakendamise jaoks hüpo-/hüpertermia süsteemi TECOtherm® kasutusjuhendit!



Hoidke eemal teravatest esemetest, kahjustada saamise oht.



Pole steriilne meditsiinitoode.



Selle mati puhul on tegemist ühekordselt kasutamiseks mõeldud tootega! Seda ei tohi taastöödelda ega enam teist korda kasutada!



Enne kasutamist kontrollige, kas esineb kahjustusi, kahjustatud pakendi korral kõrvaldage kasutuselt.

Sümbolid



Meditsiiniiseseade



Kaitske päikesevalguse eest



Tootja



Seeria nimetus



Kasutatav kuni



Kataloogi number




Hoidke kuivas kohas.



Hoidke toatemperatuuril

X	X
	X
	X
	X
X	
X	X
	X
X	
	X
X	
X	X
X	X
X	X
X	X
X	
X	
X	X

Kasutamine

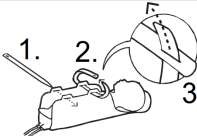

1. Asetage laps mati keskele. Pange rihmad läbi mati mõlemal küljel olevate, selleks ettenähtud aasade.
2. Tõmmake rihmade mõlemad otsad kokku, nii et matt sulguks lapse ümber.
3. Lükake rihmade kitsas, kooniline ots läbi teises otsas olevate, selleks ettenähtud aasade. Tõmmake ots täielikult läbi, kuni matt on suletud ja kinnitatud.

Puhastamine

Hügieeni ja taastöötluse eeskirjadest tuleb vastavalt riigisestele ning asutusepõhistele etteantud nõuetele kinni pidada.

Kasutama peab riigisese kasutusloa saanud ja sobivaid laia toimespektriga pindade desinfitseerimisvahendeid.

Enne ning pärast igat kasutuskorda tuleb matt ja voolikühendused puhastada ebemetevaba lapi ning õrna ja värvitu alkoholipõhise, laia toimespektriga pindade desinfitseerimisvahendi abil (näiteks Bacillol) vastavalt tootja andmetele. Eelnevalt tuleb suuremad mustumised eemaldada. Allesjäänud mustumiste korral tuleb puhastust korrata.

Ühekordseks kasutamiseks, ärge matti puhastage!

Ladustamine

Ladustage kuivas ja pimedas kohas toatemperatuuril.

Kasutuselt kõrvaldamine

Pärast kasutamistähtaja möödumist kõrvaldage kasutuselt kliiniliste jäätmetena.

Pärast ühekordset kasutamist kõrvaldage kasutuselt kliiniliste jäätmetena.

Toote omadused

Materjal:	Poliüuretaan
	Poliüuretaan/polüester
Sisselaske-/väljalaske- voolik:	Poliüuretaan
Ühenduspistik:	Atsetaal
Maksimaalne rõhk:	500 mbar
Suurus:	44 cm x 72 cm
Toote number ja toote nimi:	642 68 01 / TCmatt NEOmulti
	642 74 01 / TCmatt NEOsingle
Kaal:	0.21 kg



Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiuate internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal
Deutschland
Tel.: +49 345 120 52 04
www.tcm.gmbh