

TCmatt NEOsingle TCmatt NEOmulti



Instructions for Use

Hrvatski

Upute za uporabu

TCmatt NEOsingle / jednokratne prostirke

TCmatt NEOmulti / višekratna prostirka

Namjena

Prostirka se koristi za kontrolu temperature cijelog tijela pacijenata, posebno novorođenčadi i dojenčadi. Ona se putem sklopa crijeva spaja na TECOthem® sustav za hipo-/hipertermiju te kroz nju protječe tekućina za kontrolu temperature. Kako bi se poboljšala kontrola temperature pacijenta, prostirka se po potrebi može omotati oko tijela i pričvrstiti trakama na ušicama.

Upozorenja i mjere opreza



Samo za kliničku upotrebu.



Ako se dogode ozbiljni incidenti povezani s proizvodom molimo vas da ih prijavite proizvođaču i nadležnom tijelu.



Prostirka se smije koristiti samo kao dodatak za TECOthem® sustav za hipo-/hipertermiju!



Ovo je jedina prostirka koju je odobrio proizvođač TECOthem® hipo-/hipertermijskog sustava.



Posebno kod novorođenčadi treba izbjegavati izravan kontakt podloge s kožom pacijenta. Na podlozi treba koristiti vodoodbojnu, klinički čistu navlaku.



Obratite pažnju na upute za pravilno čišćenje proizvoda u poglavlju Čišćenje.



Obratite pažnju na upute za uporabu TECOthem® hipo-/hipertermijskog sustava za pravilnu primjenu prostirke!



Držati dalje od oštih predmeta, opasnost od oštećenja.



Nesterilni medicinski proizvod.



Ova prostirka namijenjena je za jednokratnu uporabu. Ne smije se ponovno upotrijebiti ni koristiti!



Prije korištenja provjeriti ima li oštećenja, odbaciti ako je ambalaža oštećena.

Simboli



Medicinski proizvod



Zaštititi od sunčeve svjetlosti



Proizvođač



Oznaka šarže



Upotrebljivo do



Kataloški broj

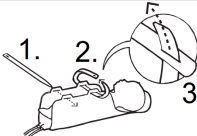


Čuvati na suhom mjestu



Čuvati na sobnoj temperaturi

X	X
	X
	X
	X
X	
X	X
	X
X	
	X
X	
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	
X	
X	X

Primjena	
 1. Stavite dijete na sredinu prostirke. Provucite trake na obje strane kroz za to predviđene ušice na prostirci. 2. Povucite oba kraja traka tako da se prostirkom objumi dijete. 3. Gurnite usku, šiljastu stranu traka kroz za to predviđene ušice na drugom kraju traka. U cijelosti provucite vrh sve dok se prostirka ne zatvori i učvrsti.	
Čišćenje	
	Moraju se poštivati propisi o higijeni i obradi u skladu s nacionalnim i specifičnim zahtjevima ustanove.
	Moraju se koristiti nacionalno odobrena sredstva širokog spektra za dezinfekciju površina prikladna za obradu.
	Prije i nakon svake upotrebe, prostirku i spojeve crijeva treba očistiti krpom koja ne ostavlja vlakna i blagim, bezbojnim sredstvom širokog spektra za dezinfekciju površina na bazi alkohola (npr. Bacillol) prema uputama proizvođača. Prethodno uklonite grubu prljavštinu. Ako ostane prljavštine, ponovite postupak čišćenja.
X	Proizvod se za jednokratnu uporabu. Prostirka se ne čisti!
Skladištenje	
X	Čuvajte na suhom i tamnom mjestu pri sobnoj temperaturi.
Odlaganje	
	Nakon jednokratne uporabe odložite kao klinički otpad.
X	Nakon jednokratne uporabe odložite kao klinički otpad.
Karakteristike proizvoda	
	Materijal: Poliuretan
X	Poliuretan / Poliestersko vlakno
X	Ulazno/izlazno crijevo: Poliuretan
X	Priključni utikač: Acetal
X	Maksimalni tlak: 500 mbar
X	Veličina: 44 cm x 72 cm
	Broj artikla i naziv proizvoda: 642 68 01 / TCmatt NEOmulti
X	642 74 01 / TCmatt NEOsingle
X	Težina: 0.21 kg





Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiuate internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal
Deutschland
Tel.: +49 345 120 52 04
www.tcm.gmbh