

TCmatt NEOsingle **TCmatt NEOmulti**



Instructions for Use

Magyar

Használati utasítása

TCmatt NEOsingle / Eldobható takaró

TCmatt NEOmulti / Többször használatos takaró

Rendeltetés

A takaró a betegek, különösen újszülöttek és csecsemők teljes testének hőmérséklet-szabályozására szolgál. A TECOtherm® hipó-/hipertermikus rendszerhez a csővezeték-készlettel csatlakoztatható, és hőmérséklet-szabályozó folyadék áramlik rajta keresztül. A beteg hőmérsékletének jobb szabályozása érdekében a takaró szükség esetén a test köré tekerhető és a fűzőlyukakkal rögzíthető.

Figyelmeztetések és óvintézkedések



Csak klinikai használatra.



Ha a termékkel kapcsolatban súlyos problémákat észlel, kérjük, jelezze azokat a gyártónak, valamint az illetékes hatóságoknak.



A takaró csak a TECOtherm® hipó-/hipertermikus rendszer tartozékaként használható!



Ez a takaró az egyetlen, amelyet a TECOtherm® hipó-/hipertermikus rendszer gyártója jóváhagyott.



Különösen újszülöttek esetében kerülni kell a takaró közvetlen érintkezését a páciens bőrével. A takarón egy víztaszító, klinikai tisztaságú takaróendőt kell használni.



Kérjük, vegye figyelembe a termék szakszerű tisztítására vonatkozó utasításokat a Tisztítás c. fejezetben.



A takaró helyes alkalmazásához kövesse a TECOtherm® hipó-/hipertermikus rendszer használati utasítását!



Tartsa távol éles tárgyaktól, ugyanis fennáll a megrongálódás veszélye.



Nem steril orvosi eszköz.



A takaró egyszer használható termék! Nem szabad újra felhasználni és másodszor használni!



Használat előtt ellenőrizze sérülések szempontjából. Ha a csomagolás sérült, dobja ki.

Szimbólumok



Orvostechnikai eszköz



Napfénytől védve tárolandó



Gyártó



Tétel megnevezése



Minőségét megőrzi



Katalógusszám




Száraz helyen tárolandó



Szobahőmérsékleten tárolandó

X	X
	X
	X
	X
X	
X	X
	X
X	
	X
X	
X	X
X	X
X	X
X	X
	X
X	
X	X

Alkalmazás

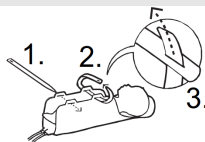

1. Helyezze a gyermeket a takaró közepére. Vezesse át a szalagokat mindkét oldalán a takarón található erre a célra szolgáló lyukakon.
2. Húzza meg a szalagok mindkét végét, hogy a takaró körülvegye a gyermeket.
3. Tolja át a szalagok keskeny, hegyes végét a szalagok másik végén található, erre a célra szolgáló lyukakon. Húzza át teljesen a hegyet, amíg a takaró össze nem zárul és rögzül.

Tisztítás

A higiéniai és kezelési előírásokat a nemzeti és a létesítményre vonatkozó előírásoknak megfelelően be kell tartani. Nemzetileg engedélyezett, felületfertőtlenítésre alkalmas, széles spektrumú fertőtlenítőszerek kell használni. Minden alkalmazás előtt és után a takarót és a csövezeteket szőszmentes kendővel és alkohol alapú, széles spektrumú, enyhe, színtelen felületfertőtlenítő szerrel (pl. Bacillol) kell megtisztítani a gyártó utasításainak megfelelően. Előzetesen el kell távolítani a durva szennyeződések. Ha maradnak szennyeződések, a tisztítást meg kell ismételni. A takaró egyszer használatos, tisztításra nem alkalmas!
--

Tárolás

Száraz, sötét helyen, szobahőmérsékleten tárolja.

Ártalmatlanítás

A terméket a szavidő lejártát követően klinikai hulladékként kezelje.

Egyszeri használat után kórházi hulladékként ártalmatlanítsa.

Terméktulajdonságok

Anyaga:	Poliuretán
	Poliuretán / Poliészter
Beömlő/kivezető cső:	Poliuretán
Csatlakozódugó:	Acetal
Maximális nyomás:	500 mbar
Méret:	44 cm x 72 cm
Cikkszám és terméknév:	642 68 01 / TCmatt NEOMulti
	642 74 01 / TCmatt NEOSingle
Súly:	0.21 kg

HU



Az Ön nyelvén készült használati utasítást az alábbi weboldalon találja: www.service.tcm.gmbh/ifu/



Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distribitora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiata internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal
Deutschland
Tel.: +49 345 120 52 04
www.tcm.gmbh