

TCmatt NEOsingle TCmatt NEOmulti



Instructions for Use

Lietuvių

Naudojimo instrukcija

TCmatt NEOsingle / Vienreizlietojamā paklājīņa

TCmatt NEOmulti / daugkartinis kilimėlis

Gaminio paskirtis

Kilimėlis naudojamas pacientų, ypač naujagimių ir kūdikių, kūno temperatūros kontrolei. Jis prijungiamas prie TECOtherm® Hypo / hipertermijos sistemos, naudojant žarnelių rinkinį ir per jį teka termostatinis skystis. Norint kontroliuoti paciento temperatūrą, kilimėlį apvyniokite aplink kūną ir užriškite dirželius ant kilpų.

Išpėjimai ir atsargumo priemonės



Skirtas tik klinikiniam naudojimui.



Kilus su susijusiu produktu didelių problemų, praneškite apie tai gamintojui ir kompetentingai institucijai.



Kilimėlį galima naudoti tik kaip TECOtherm® Hypo / hipertermijos sistemos priedą!



Šis kilimėlis yra vienintelis, kurį patvirtino TECOtherm® Hypo / hipertermijos sistemos gamintojas.



Ypač reikėtų vengti tiesioginio kilimėlio sąlyčio su naujagimio paciento oda. Ant kilimėlio reikia naudoti vandeniu atsparų, kliniškai švarų užtiesalą.



Atkreipkite dėmesį į gaminio tinkamo valymo instrukcijas, pateiktas skyriuje Valymas.



Norėdami teisingai naudoti kilimėlį, vadovaukitės TECOtherm® – hipo-/hipertermijos sistemos naudojimo instrukcija!



Laikykitė atokiau nuo aštrių daiktų, sugadinimo rizika.



Nesterilus medicininis produktas.



Šis kilimėlis yra vienkartinis produktas! Jo negalima perdirbti arba naudoti antrą kartą!



Prieš naudojimą patikrinkite, ar nėra pažeidimų; jei pakuotė pažeista, išmeskite produktą.

Simboliai



Medicinos prietaisas



Saugoti nuo saulės spindulių



Gamintojas



Partijos pavadinimas



Galiojimo data



Katalogo numeris




Laikyti sausoje vietoje



Laikykite kambario temperatūroje

X	X
	X
	X
	X
X	
X	X
	X
X	
	X
X	
X	X
X	X
X	X
X	X
	X
X	
X	X

Naudojimas

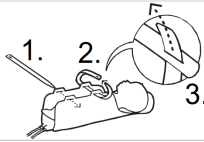

1. Paguldykite vaiką kilimėlio centre. Pervirkite dirželius abiejose pusėse per tam skirtas kilimėlio kilpas.
2. Sujunkite abu dirželių galus, kad kilimėlis užsidarytų aplink vaiką.
3. Siaurąjį, smailėjantį dirželio galą perkaiškite per kito galo kilpas. Traukite galiuką iki galo, kol kilimėlis užsidarys ir pritvirtins.

Valymas

Higienos ir perdirbimo taisyklių reikia laikytis pagal nacionalinius ir konkrečiai įmonei taikomus reikalavimus.

Turi būti naudojami nacionaliniu mastu patvirtinti ir tinkami plataus veikimo spektro paviršių dezinfekantai.

Prieš kiekvieną naudojimą ir po jo kilimėlio ir žarnos jungtis reikia nuvalyti nepūkuota šluoste ir švelnia, bespalve, alkoholio pagrindu pagaminta plataus veikimo spektro paviršių dezinfekavimo priemone su (pvz., „Bacillol“) pagal gamintojo instrukcijas. Pirmiausia pašalinkite stambius nešvarumus. Jei liko nešvarumų, pakartokite valymo procesą.

Vienkartinio naudojimo, nevalykite kilimėlio!

Saugojimas

Saugokite sausoje ir tamsioje vietoje, kambario temperatūroje.

Utilizavimas

Pasibaigus galiojimo laikui, utilizuokite kaip medicines atliekas.

Po vienkartinio naudojimo utilizuokite kaip medicines atliekas.

Produkto savybės

Medžiaga:	Poliuretanas
	Poliuretanas / Poliesteris
Išleidimo / išleidimo žarnelė:	Poliuretanas
Jungtis:	Acetalis
Maksimalus slėgis:	500 mbar
Dydis:	44 cm x 72 cm
Prekės numeris ir produkto pavadinimas:	642 68 01 / TCmatt NEOmulti
	642 74 01 / TCmatt NEOsingle
Svoris:	0.21 kg





Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiata internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal
Deutschland
Tel.: +49 345 120 52 04
www.tcm.gmbh