

TCmatt NEOsingle TCmatt NEOmulti



Instructions for Use

Nederlands

Gebruiksaanwijzing

TCmatt NEOsingle / wegwerpmat

TCmatt NEOmulti / herbruikbare mat

Beoogd gebruik

De mat is bedoeld voor de temperatuurregeling van het gehele lichaam van patiënten, in het bijzonder pasgeborenen en zuigelingen. Hij wordt via de slangarmatuur op het TECOthem® – hypo-/hyperthermiesysteem aangesloten, waarna er temperatuurverhogend of -verlagend stroomt. Om de temperatuurregeling te verbeteren, kan een mat indien nodig om het lichaam van de patiënt worden gewikkeld en met banden aan de ogen worden dichtgemaakt.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen



Alleen voor klinisch gebruik.



Mochten er in combinatie met het product ernstige incidenten optreden, meld deze dan alstublieft bij de fabrikant en de bevoegde autoriteit.



De mat mag uitsluitend als toebehoren van het TECOthem® – hypo-/hyperthermiesysteem worden gebruikt!



Deze mat is de enige door de fabrikant van het TECOthem® hypo-/hyperthermiesysteem goedgekeurde mat.



Met name bij pasgeborenen moet direct contact van de mat met de huid van de patiënt worden vermeden. Op de mat moet een waterafstotende, klinisch schone afdekdoek worden gebruikt.



Neem de aanwijzingen omtrent de deskundige reiniging van het product in hoofdstuk Reiniging in acht.



Volg de gebruiksaanwijzing van het TECOthem® – hypo-/hyperthermiesysteem voor het correcte gebruik van de mat!



Uit de buurt houden van scherpe voorwerpen. Gevaar voor beschadigingen.



Niet-steriel medisch product.



Deze mat is een product dat slechts eenmalig mag worden gebruikt! Hij mag niet worden gereinigd of een tweede keer worden gebruikt!



Controleer voor gebruik op beschadigingen. Verwijderen als de verpakking is beschadigd.

Symbolen



Medisch product



Tegen zonlicht beschermen



Fabrikant



Charge-aanduiding



Te gebruiken tot



Catalogusnummer




Droog bewaren



Bij kamertemperatuur bewaren

X	X
	X
	X
	X
X	
X	X
	X
X	
	X
X	
X	X
X	X
X	X
X	X
X	
X	
X	X

Toepassing

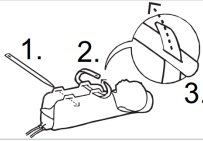

1. Leg het kind in het midden op de mat. Steek de riempjes aan beide zijden door de daarvoor bedoelde ogen in de mat.
2. Trek de beide uiteinden van de riempjes samen zodat de mat zich om het kind heen sluit.
3. Schuif de smalle, naar een punt toelopende kant van de riempjes door de daarvoor bestemde ogen aan het andere uiteinde van de riempjes. Trek het riempje er helemaal doorheen tot de mat is gesloten en vast zit.

Reiniging

De hygiëne- en preparatievoorschriften dienen overeenkomstig de nationale en voor de zorginstelling specifieke voorschriften te worden nageleefd.

Er moeten nationaal goedgekeurde en voor de behandeling geschikte oppervlaktedesinfectiemiddelen met een brede werking worden gebruikt.

Voor en na elk gebruik moeten de mat en de slangaansluitingen met een pluivrije doek en een mild, kleurloos oppervlaktedesinfectiemiddel met brede werking op alcoholische basis (bijvoorbeeld bacillol) overeenkomstig de specificaties van de fabrikant worden gereinigd. Vooraf moeten grove verontreinigingen worden verwijderd. Als verontreinigingen achterblijven, moet de reiniging worden herhaald.

Eenmalig gebruik, de mat niet reinigen!

Opslag

Droog en donker bewaren op kamertemperatuur.

Verwijdering

Na afloop van de bruikbaarheid als klinisch afval afvoeren.

Na eenmalig gebruik als klinisch afval verwijderen.

Producteigenschappen

Materiaal:	polyurethaan
	polyurethaan/polyester
Inlaat-/ Uitlaatslang:	polyurethaan
Aansluitstekker:	acetaal
Maximale druk:	500 mbar
Afmeting:	44 cm x 72 cm
Artikelnummer en productnaam:	642 68 01 / TCmatt NEOmulti
	642 74 01 / TCmatt NEOsingle
Gewicht:	0.21 kg



De gebruiksaanwijzing in uw eigen taal is online te vinden op: www.service.tcm.gmbh/ifu/



Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiuate internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal
Deutschland
Tel.: +49 345 120 52 04
www.tcm.gmbh