

TCmatt NEOsingle TCmatt NEOmulti



Instructions for Use

Norsk

Bruksanvisning

TCmatt NEOsingle / engangsmatte

TCmatt NEOmulti / Flerbruksmatte

Bruksområde

Matten brukes til temperering av hele pasientens kropp, spesielt nyfødte og babyer. De kobles til TECOtherm® Hypo-/ hypertermisystemet via slangesettet og gjennomstrømmes med tempereringsvæske. For å øke pasientens temperering kan man ved behov pakke inn kroppen i en matte som festes med bånd og maljer.

Advarsler og forholdsregler



Kun for klinisk bruk.



Hvis det oppstår alvorlige hendelser i forbindelse med produktet, vennligst rapporter disse til produsenten og til de aktuelle myndighetene.



Matten får kun brukes som tilbehør til TECOtherm® Hypo-/ hypertermisystemet!



Denne matten er den eneste matten som produsenten TECOtherm® Hypo-/Hyperthermisystem har frigitt.



Man bør unngå at pasientens hud kommer i direkte kontakt med matten, dette gjelder spesielt hos nyfødte. Det skal legges et vannavvisende, klinisk rent og dekkende klede på matten.



Vær vennlig og følg henvisningen om sakkyndig rengjøring av produktet i kapittel Rengjøring.



Følg TECOtherm® Hypo-/ hypertermisystemets bruksanvisning for riktig bruk av matten!



Hold borte fra skarpe gjenstander. Skadefare.



Ikke-sterilt medisinsk produkt.



Denne matten er kun tenkt for engangsbruk! Den får ikke prepareres og brukes på nytt!



Sjekk for skader før bruk. Kast ved skadet Emballasje.

Symboler



Medisinsk produkt



Skal beskyttes mot direkte sollys



Produsent



Batch-betegnelse



Holdbar til



Katalognummer




Oppbevares tørt



Lagres ved romtemperatur

X	X
	X
	X
	X
X	
X	X
	X
X	
	X
X	
X	X
X	X
X	X
	X
X	
X	X

Bruk

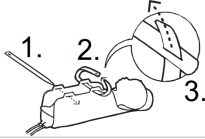

1. Sett barnet midt på matten. Før båndene på begge sider gjennom maljene på matten.
2. Dra sammen endene på båndene slik at matten dekker barnet.
3. Skyv båndenes smale, spisse side gjennom maljene på matten. Dra endene helt gjennom til matten er lukket og fiksert.

Rengjøring

Følg alltid gjeldende, nasjonale hygiene- og foredlings- samt innretningsforskrifter.

Bruk i ditt lands godkjente og for foredling egnede flatedesinfeksjonsmidler med bredspektrert virkning.

Før og etter hver bruk skal, i henhold til produsentens opplysninger, matte og slangetilkoblinger rengjøres med en lofri klut og mildt, nøytralt flatedesinfeksjonsmiddel på alkoholbasis (f. eks. Basillol). Fjern grov smuss først. Dersom all smuss ikke kan fjernes, gjenta rengjøringen.

Engangsbruk, matten skal ikke rengjøres!

Lagring

Oppbevares i romtemperatur på et tørt og mørkt sted.

Avhending

Dersom datoen er løpt ut skal produktet sorteres som klinisk avfall.

Etter bruk, kast som klinisk avfall.

Produktegenskaper

Materiale:	Polyuretan
	Polyuretan / polyester
Inn-/utgangs slange:	Polyuretan
Tilkoblingsstøpsel:	Acetal
Maks. trykk:	500 mbar
Størrelse:	44 cm x 72 cm
Artikkelnummer og produktnavn:	642 68 01 / TCmatt NEOmulti
	642 74 01 / TCmatt NEOsingle
Vekt:	0.21 kg

NO



Bruksanvisning oversatt til ditt språk finner du her: www.service.tcm.gmbh/ifu/



Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiuate internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal
Deutschland
Tel.: +49 345 120 52 04
www.tcm.gmbh