

TCmatt NEOsingle TCmatt NEOmulti



Instructions for Use

Português

Instruções de utilização

TCmatt NEOsingle / Colchão Descartável

TCmatt NEOmulti / Resguardo Descartável

Finalidade

O resguardo serve para a termorregulação de todo o corpo dos pacientes, em especial de recém-nascidos e lactentes. É ligado ao sistema de hipo-/hipertermia TECOtherm® através do conjunto de tubos e percorrido por um líquido de regulação térmica. Para melhorar a termorregulação do paciente, o resguardo pode, se necessário, ser envolvido à volta do corpo e preso com fitas nos respetivos ilhós.

Advertências e precauções



Apenas para uso clínico.



No caso de ocorrerem incidentes graves relacionados com o produto, é favor comunicar os mesmos ao fabricante e à autoridade competente.



O resguardo só pode ser utilizado como acessório do sistema de hipo-/hipertermia TECOtherm®!



Este resguardo é o único aprovado pelo fabricante do sistema de hipo-/hipertermia TECOtherm®.



Em especial nos recém-nascidos, deve evitar-se o contacto direto do resguardo com a pele do paciente. Deve ser utilizado um pano de cobertura repelente à água e clinicamente esterilizado sobre a manta.



Observe as instruções para a limpeza adequada do produto no capítulo Limpeza.



Tenha em atenção as instruções de utilização do sistema de hipo-/hipertermia TECOtherm® para a correta utilização do resguardo!



Manter afastado de objetos pontiagudos, risco de danos.



Dispositivo médico não estéril.



Neste caso, trata-se de um produto concebido para uma única utilização! Não pode ser reciclado nem reutilizado uma segunda vez!



Antes da utilização, verificar a existência de danos, caso sejam detetados, eliminar a embalagem.

Símbolos



Dispositivo médico



Proteger da luz solar



Fabricante



Designação do lote



Pode ser utilizado até



Número de catálogo




Guardar em local seco.



Guardar à temperatura ambiente.

X	X
	X
	X
	X
X	
X	X
	X
X	
	X
X	
X	X
X	X
X	X
X	X
X	
X	X
X	
X	X

Aplicação

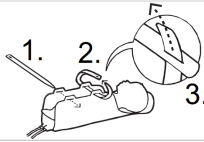

1. Coloque a criança no centro do resguardo. Passe as faixas de ambos os lados através dos ilhós destinados no resguardo.
2. Puxe as duas extremidades das faixas em conjunto para que o resguardo se feche à volta da criança.
3. Deslize o lado estreito e cônico das faixas através dos ilhós na outra extremidade das mesmas. Puxe a ponta até ao fim até que o resguardo esteja fechado e seguro.

Limpeza

As normas de higiene e preparação devem ser cumpridas de acordo com as diretrizes nacionais e específicas da instituição.

Devem ser utilizados desinfetantes de superfície autorizados a nível nacional, com um efeito de largo espectro e adequados para o tratamento.

Antes e após cada utilização, o resguardo e as ligações dos tubos devem ser limpos com um pano que não largue fios e um desinfetante de superfícies suave e incolor à base de álcool (por ex., Bacillol), de acordo com as instruções do fabricante. Remover previamente qualquer sujidade mais grosseira. Se permanecer sujidade, repetir a limpeza.

Utilização única, não limpar o colchão!

Armazenamento

Guardar num local seco, ao abrigo da luz e à temperatura ambiente.

Eliminação

Após o fim da validade, eliminar como resíduo hospitalar.

Após utilização única, eliminar como resíduo hospitalar.

Características do produto

Material:	Poliuretano
	Poliuretano/Poliéster
Mangueira de entrada/saída:	Poliuretano
Ficha de ligação:	Acetal
Pressão máxima:	500 mbar
Tamanho:	44 cm x 72 cm
Número do artigo e nome do produto:	642 68 01 / TCmatt NEOmulti
	642 74 01 / TCmatt NEOsingle
Peso:	0.21 kg





Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiuate internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal
Deutschland
Tel.: +49 345 120 52 04
www.tcm.gmbh