

TCmatt NEOsingle TCmatt NEOmulti



Instructions for Use

Română

Instrucțiuni de utilizare

TCmatt NEOsingle / păturică de unică folosință

TCmatt NEOmulti / păturică reutilizabilă

Utilizarea prevăzută

Păturica servește pentru controlul temperaturii întregului corp al pacienților, în special al nou-născuților și sugarilor. Aceasta se conectează prin furtun la TECOtherm® – sistem de hipo-/hipertermie și prin ea curge un lichid de control al temperaturii. Pentru a îmbunătăți controlul temperaturii pacienților, o păturică poate fi, în caz de nevoie, înfășurată în jurul corpului și prinsă cu ajutorul curelelor la orificii.

Indicații de avertizare și măsuri de precauție



Doar pentru uz medical.



Dacă în legătură cu produsul apar incidente grave, vă rugăm să le comunicați producătorului și autorității responsabile.



Păturica poate fi utilizată exclusiv ca accesoriu al sistemului TECOtherm® de hipo-/hipertermie!



Această păturică este singura păturică aprobată de producătorul sistemului TECOtherm® de hipo-/hipertermie.



Trebuie evitat contactul direct între păturică și pielea pacientului, în special în cazul nou-născuților. Pe păturică ar trebui să se utilizeze un cearceaf de acoperire hidrofug, clinic curat.



Vă rugăm să urmați indicațiile pentru curățarea corespunzătoare a produsului din capitoul Curățare.



Respectați instrucțiunile de utilizare ale sistemului TECOtherm® de hipo-/hipertermie pentru utilizarea corectă a păturicii!



Tineți la depărtare de obiecte ascuțite, pericol de Deteriorare.



Produs medical nesteril.



Această păturică este un produs de unică folosință! Aceasta nu poate fi reciclată sau utilizată a doua oară!



Verificați înainte de utilizare dacă prezintă deteriorări, aruncați produsul dacă ambalajul este deteriorat.

Simboluri



Produs medical



Protejați împotriva luminii solare



Producător



Denumire lot



Data expirării



Număr de catalog




Păstrați în stare uscată



Depozitați la temperatura camerei

X	X
	X
	X
	X
X	
X	X
	X
X	
	X
X	
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X

Utilizare

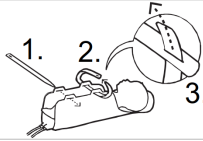

1. Puneți copilul în mijlocul păturicii. Introduceți benzile pe ambele părți în inelele prevăzute în acest scop în păturică.
2. Apropiati ambele capete ale benzilor, în așa fel încât păturica se închide în jurul copilului.
3. Împingeți partea îngustă, care se subțiază ale benzilor prin inelele prevăzute în acest scop, la celălalt capăt al benzilor. Trageți de vârf complet, până când păturica este închisă și fixată.

Curățare

- Reglementările privind igiena și pregătire trebuie respectate în conformitate cu cerințele naționale și specifice fiecărei unități.
- Trebuie să se utilizeze dezinfectanți de suprafață cu spectru larg, autorizați la nivel național și adecvați pentru pregătire.
- Înainte și după fiecare utilizare, curățați păturica și racordurile furtunului cu o cârpă fără scame și un dezinfectant de suprafață blând, incolor cu spectru larg, pe bază de alcool (de exemplu, Bacillol), în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Îndepărtați în prealabil murdăria grosieră. Repetați procesul de curățare dacă rămâne murdărie.
- Utilizare unică, nu curățați păturica!

Depozitare

- Depozitați într-un loc uscat și întunecat, la temperatura Camerei.

Eliminare

- Eliminați ca deșeu clinic la sfârșitul duratei sale de utilizare.
- După o singură utilizare, eliminați ca deșeu clinic.

Caracteristicile produsului

Material:	Poliuretan
	Poliuretan/Polyester
Furtun de admisie / evacuare:	Poliuretan
Fișă de conectare:	Acetal
Presiune maximă:	500 mbar
Dimensiune:	44 cm x 72 cm
Număr articol și denumire produs:	642 68 01 / TCmatt NEOmulti
	642 74 01 / TCmatt NEOsingle
Greutate:	0.21 kg





Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiuate internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal
Deutschland
Tel.: +49 345 120 52 04
www.tcm.gmbh