

TCmatt NEOsingle TCmatt NEOmulti



Instructions for Use

Slovenčina

Návod na použitie

TCmatt NEOsingle / jednorazovej podložky

TCmatt NEOmulti / opakovane použiteľný matrac

Stanovený účel

Matrac slúži na celotelovú reguláciu teploty pacientov, predovšetkým novorodencov a dojčiat. Pripája sa pomocou súpravy hadičiek k systému TECOtherm® na riadenú hypo-/hypertermiu, pričom je prechodne plnená temperačnou kvapalinou. Na zvýšenie účinnosti regulácie teploty je možné matrac podľa potreby obtočiť okolo tela a pripevniť pomocou popruhov cez očka.

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia



Len na klinické použitie.



V prípade výskytu závažných incidentov v súvislosti s týmto produktom ich, prosím, nahláste výrobcovi a príslušnému úradu.



Matrac sa smie používať výhradne ako príslušenstvo systému TECOtherm® na riadenú hypo-/hypertermiu!



Tento matrac je jediný matrac schválený výrobcom systému TECOtherm® pre hypo-/hypertermiu.



Najmä pri novorodencoch sa má zabrániť priamemu kontaktu matraca s pokožkou pacienta. Na matrac sa má položiť vodoodpudivá, klinicky čistá ochranná textília.



Venujte prosím pozornosť pokynom na správne čistenie produktu v kapitole Čistenie.



Dodržiavajte návod na použitie systému TECOtherm® na riadenú hypo-/hypertermiu, aby ste matrac používali správne!



Chráňte pred ostrými predmetmi – hrozí riziko poškodenia.



Nejedná sa o sterilnú zdravotnícku pomôcku.



Táto matrac je určená na jednorazové použitie! Nesmie sa znovu spracovávať ani opakovane používať!



Pred použitím skontrolujte, či nie je matrac poškodený. V prípade poškodeného obalu ju zlikvidujte.

Symbody



Zdravotnícky prostriedok



Chráňte pred slnečným svetlom



Výrobca



Označenie šarže



Použiteľné do



Katalógové číslo




Uchovávať na suchom mieste



Skladujte pri izbovej teplote

X	X
	X
	X
	X
X	
X	X
	X
X	
X	
X	X
X	X
X	X
X	X
X	
X	
X	X

Použitie

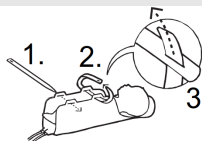

1. Umiestnite dieťa do stredu matraca. Popruhy na oboch stranách prevlečte určenými očkami v matraci.
2. Stiahnite oba konce popruhov k sebe tak, aby sa matrac okolo dieťa uzavrel.
3. Zasuňte úzky, do špičky zúžený koniec popruhov do určených očiek na druhom konci popruhov. Konec úplne pretiahnite, až kým sa matrac neuzavrie a nezafixuje.

Čistenie

Hygienické a dekontaminačné pokyny je potrebné dodržiavať podľa národných a zariadením stanovených predpisov.

Je potrebné používať povrchové dezinfekčné prostriedky so širokospektrálnym účinkom, ktoré sú národne schválené a vhodné na reproces.

Pred a po každom použití je potrebné matrac a hadicové prípojky vyčistiť handričkou bez vlákien a jemným, bezfarebným povrchovým dezinfekčným prostriedkom so širokospektrálnym účinkom na báze alkoholu (napr. Bacillol) podľa pokynov výrobcu. Najskôr odstráňte hrubé nečistoty. Ak nečistoty pretrvávajú, čistenie zopakujte.

Jednorazové použitie – matrac nečistiť!

Skladovanie

Skladujte na suchom a tmavom mieste pri izbovej teplote.

6 Likvidácia

Po uplynutí doby použiteľnosti zlikvidujte ako klinický odpad.

Po jednorazovom použití zlikvidujte ako klinický odpad.

Vlastnosti produktu

Materiál: Polyuretán

Polyuretán / polyester

Prívodná/odvodová hadička: Polyuretán

Konektor: Acetál

Maximálny tlak: 500 mbar

Veľkosť: 44 cm x 72 cm

Číslo artiklu a názov produktu: 642 68 01 / TCmatt NEOmulti

642 74 01 / TCmatt NEOsingle

Hmotnosť: 0.21 kg





Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiuate internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal
Deutschland
Tel.: +49 345 120 52 04
www.tcm.gmbh