

TCmatt NEOsingle TCmatt NEOmulti



Instructions for Use

Slovenščina

Navodila za uporabo

TCmatt NEOsingle / blazine za enkratno Uporabo

TCmatt NEOmulti / blazine za večkratno uporabo

Namen uporabe

Blazina se uporablja za temperiranje celotnega telesa bolnikov, zlasti novorojenčkov in dojenčkov. Prek cevne garniture se priključi na sistem hipo-/hipertermije TECOtherm® in se skozi njo pretaka temperirana tekočina. Da bi izboljšali temperiranje bolnika, lahko po potrebi ovijete njegovo telo z blazino in jo zaprete s trakovi na ušesih.

Opozorilni napotki in previdnostni ukrepi



Primerno samo za klinično uporabo.



Če se v zvezi z izdelkom pojavijo težji dogodki, prosimo, da te javite proizvajalcu in pristojnemu organu.



Blazino smete uporabljati samo kot opremo sistema hipo-/hipertermije TECOtherm®!



Ta blazina je edina blazina, ki jo je odobril proizvajalec sistema hipo-/hipertermije TECOtherm®.



Zlasti pri novorojenčkih se je treba izogibati neposrednemu stiku blazine z bolnikovo kožo. Na blazini je treba uporabiti vodoodbojno, klinično čisto prekrivno tkanino.



Prosimo, upoštevajte napotke za strokovno čiščenje izdelka v poglavju čiščenje.



Upoštevajte navodila za uporabo za sistem hipo-/hipertermije TECOtherm® za pravilno uporabo blazine!



Ne približujte ostrim predmetom, nevarnost poškodovanja.



Nesterilni medicinski izdelek.



Pri tej blazini gre za izdelek za enkratno uporabo! Ni je dovoljeno še enkrat pripraviti in uporabiti drugič.



Pred uporabo preverite glede poškodb, ob poškodovani embalaži izdelek zavrzite.

Simboli



Medicinski pripomoček



Zaščitite pred sončno svetlobo



Proizvajalec



Označitev šarže



Uporabno do



Kataloška številka




Shranjujte na suhem.



Shranjujte pri sobni temperaturi.

X	X
	X
	X
	X
X	
X	X
	X
X	
	X
X	
X	X
X	X
X	X
X	X
X	
X	
X	X

Uporaba

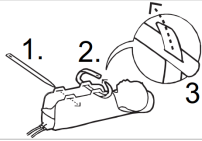

1. Namestite otroka na sredino blazine. Napeljite trakove na obeh straneh skozi za to predvidena ušesca na blazini.
2. Zategnite skupaj oba konca trakov, tako da se blazina ovije okrog otroka.
3. Potisnite ozko, koničasto stran trakov skozi predvidena ušesca na drugem koncu. Potegnite konico povsem skozi, dokler se blazina ne zapre in fiksira.

Čiščenje

Higienske predpise in predpise za postopek priprave je treba upoštevati v skladu z nacionalnimi predpisi in predpisi, ki so specifični za ustanovo.

Uporabiti je treba v državi uporabe odobrena in za pripravo ustrezna površinska razkužila s širokospektralnim delovanjem.

Pred in po vsaki uporabi je treba blazino in cevne priključke očistiti s krpo, ki se ne kosmiči, in z blagim, brezbarvnim površinskim razkužilom na podlagi alkohola (na primer Bacillol), v skladu z navodili proizvajalca. Pred tem je treba odstraniti večje nečistoče. Če po čiščenju ostanejo ostanki umazanja, je treba postopek čiščenja ponoviti.

Enkratna uporaba, blazine ne čistite!

Shranjevanje

Hraniti v suhem in temnem prostoru pri sobni temperaturi!

6 Odstranjevanje

Po preteku roka uporabnosti odvrzite kot klinični odpadek.

Po enkratni uporabi odstraniti kot klinični odpadek.

Značilnosti izdelka

Material:	Poliuretan
	Poliuretan/Poliester
Vstopna/izstopna cev:	Poliuretan
Priključni vtič:	Acetal
Maksimalni Tlak:	500 mbar
Velikost:	44 cm x 72 cm
Številka izdelka in ime izdelka:	642 68 01 / TCmatt NEOmulti
	642 74 01 / TCmatt NEOsingle
Teža:	0.21 kg





Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiuate internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal
Deutschland
Tel.: +49 345 120 52 04
www.tcm.gmbh