

TCmatt NEOsingle **TCmatt NEOmulti**



Instructions for Use

Svenska

Bruksanvisning

TCmatt NEOsingle / engångsmatta

TCmatt NEOmulti / Återanvändningsbar matta

Användningssyfte

Mattan är avsedd för temperering av hela kroppen hos patienter, särskilt nyfödda och spädbarn. Den är ansluten till TECOterm® – system för hypo-/hypertermi via en slang och flödas med en tempererad vätska. För att förbättra patientens temperatur kan en matta vid behov svepas runt kroppen och fästas med band i öglorna.

Varningsmeddelanden och försiktighetsåtgärder



Endast för klinisk användning.



Om allvarliga incidenter inträffar i samband med användningen av produkten, vänligen kontakta tillverkaren och den behöriga myndigheten.



Mattan får endast användas som tillbehör till TECOterm® – system för hypo-/hypertermi!



Denna matta är den enda matta som godkänts av tillverkaren av TECOterm® Hypo-/Hyperthermiesystem .



Särskilt hos nyfödda bör direkt kontakt mellan mattan och patientens hud undvikas. En vattenavvisande, kliniskt ren skyddsduk bör användas över mattan.



Beakta upplysningarna om fackmässig rengöring av produkten i kapitel Rengöring.



Följ bruksanvisningen för TECOterm® – system för hypo-/hypertermi för korrekt användning av mattan!



Hålls borta från vassa föremål, risk för skada.



Detta är inte en steril medicinsk produkt.



Denna matta är en produkt för engångsbruk! Den får varken upparbetas eller användas en andra gång!



Före användningen, kontrollera om det finns synliga skador. Kassera om förpackningen är skadad.

Symboler



Medicinteknisk produkt



Skyddas mot solljus



Tillverkare



Batchbeteckning



Bäst före



Katalognummer

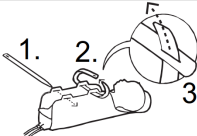


Förvaras torrt



Ska förvaras i rumstemperatur

X	X
	X
	X
	X
X	
X	X
	X
X	
	X
X	
X	X
X	X
X	X
X	X
	X
X	
X	X

Användning	
 1. Placera barnet i mitten av mattan. Dra remmarna på båda sidor genom de avsedda öglorna i mattan. 2. Dra ihop båda ändarna av remmarna så att mattan sluter sig runt barnet. 3. Tryck den smala, avsmalnande änden av remmarna genom öglorna i den andra änden. Dra spetsen hela vägen igenom tills mattan är stängd och säkrad.	
Rengöring	
	Hygien- och återbehandlingsföreskrifter måste iakttas i enlighet med nationella och institutionsspecifika krav.
	Nationellt godkända yttesinfektionsmedel som är lämpliga för återanvändning måste användas.
	Före och efter varje användning måste mattan och slanganslutningarna rengöras med en luddfri duk och ett mildt, färglöst, alkoholbaserat yttesinfektionsmedel (till exempel Bacillol) i enlighet med tillverkarens anvisningar. Grov smuts måste avlägsnas i förväg. Om envisa föroreningar finns kvar måste rengöringsprocessen upprepas.
X	Endast för engångsbruk med TECOtherm® NEO!
Förvaring	
X	Torrt och mörkt vid rumstemperatur.
Avfallshantering	
	Avfallshantering som medicinskt avfall när återanvändning inte längre är möjlig.
X	Avfallshandera efter engångsbruk som medicinskt avfall.
Produktegenskaper	
	Material: Polyuretan
X	Polyuretan/polyester
X	Inlopps-/utlopps- slang: Polyuretan
X	Anslutningskontakt: Acetal
X	Maxtryck: 500 mbar
X	Storlek: 44 cm x 72 cm
	Artikelnummer och produktnamn: 642 68 01 / TCmatt NEOmulti
X	642 74 01 / TCmatt NEOsingle
X	Vikt: 0.21 kg



Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiuate internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal
Deutschland
Tel.: +49 345 120 52 04
www.tcm.gmbh