

TCmatt NEOsingle TCmatt NEOmulti



Instructions for Use

Türkçe

Kullanma Kılavuzu

TCmatt NEOsingle / Tek Kullanımlık Yatak

TCmatt NEOmulti / çok kullanımlık

Kullanım amacı

Mat, özellikle de yenidoğanlarda ve süt çocuklarında olmak üzere hastalarda tüm vücut için ısı ayarını yapılması amacıyla kullanılmaktadır. Mat, hortum seti üzerinden TECOtherm® hipotermi/hipotermi sistemine bağlanır ve içerisinde sıcaklık ayarlama sıvısının dolaşması sağlanır. Mat, hastanın ısı ayarını daha iyi hale getirmek için gerektiğinde vücuda sarılabilir ve halkalarda bantlarla kapatılabilir.

Uyarı notları ve tedbirler



Sadece hastanede kullanım içindir.



Ürünle bağlantılı olarak ciddi olayların meydana gelmesi durumunda, bunları lütfen üreticiye ve sorumlu makama bildirin.



Mat yalnızca TECOtherm® hipotermi/hipotermi sisteminin bir aksesuarı olarak kullanılabilir!



Bu mat, TECOtherm® hipotermi/hipotermi sistemi üreticisi tarafından onaylanan tek mattır.



Özellikle yenidoğanlarda mat ile hastanın cildi arasında doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Matın üzerinde su geçirme-yen, klinik olarak temiz bir örtü kullanılmalıdır.



Lütfen Bölüm Temizlik altında ürünün usulüne uygun temizlenmesine yönelik notları dikkate alın.



Matıdoğru şekilde uygulanması için TECOtherm® hipotermi/ hipotermi sisteminin kullanım talimatını dikkate alın!



Keskin cisimlerden uzak tutun, hasar tehlikesi.



Steril olmayan tıbbi ürün.



Söz konusu ürün tek seferlik kullanım için öngörülmüş bir mattır! Mat tekrar hazırlanamaz veya ikinci bir sefer kullanılamaz!



Kullanmadan önce hasara yönelik kontrol edin, ambalaj hasarlıysa ürünü atın.

Semboller



Tıbbi ürün



Güneş ışığına karşı koruyun



Üretici



Parti tanımı



Son kullanım tarihi



Katalog numarası




Kuru bir yerde muhafaza edin



Oda sıcaklığında depolayın

X	X
	X
	X
	X
X	
X	X
	X
X	
	X
X	
X	
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X

Uygulama

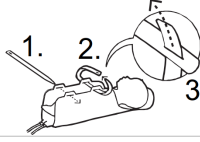

1. Çocuğu matın ortasına yerleştirin. Bantları, her iki tarafa matta bunun için öngörülen halkalardan geçirin.
2. Bantların her iki ucunu, matın çocuğu saracak şekilde çekip birleştirin.
3. Bantların ince, sivrileşen tarafını bantların ucunda bunun için öngörülen halkalardan geçirin. Mat kapanıp sabitlenene kadar ucu çekip tamamıyla geçirin.

Temizlik

Hijyen ve hazırlama yönetmeliklerine, ulusal ve kuruma özgü şartlara uygun olarak uyulmalıdır.

Ulusal olarak onaylanmış ve hazırlama için uygun olan geniş spektrumlu yüzey dezenfektanları kullanılmalıdır.

Her uygulamadan önce ve sonra, mat ve hortum bağlantıları tüy bırakmayan bir bez ve hafif, renksiz alkol bazlı geniş spektrumlu bir yüzey dezenfektanı (örneğin Bacillol) ile üreticinin talimatlarına uygun olarak temizlenmelidir. Önce kaba kirlenmeler temizlenmelidir. Kirlenmeler kalırsa temizleme tekrarlanmalıdır.

Tek seferlik kullanım içindir. Matı temizlemeyin!

Depolama

Oda sıcaklığında, kuru ve karanlık bir yerde depolayın.

Bertaraf

Kullanım süresi sona erdikten sonra klinik atık olarak bertaraf edin.

Tek seferlik kullanımdan sonra klinik atık olarak bertaraf edin.

Ürün özellikleri

Malzeme:	Poliüretan
	Poliüretan / polyester
Giriş/çıkış hortumu:	Poliüretan
Bağlantı soketi:	Asetal
Maksimum basınç:	500 mbar
Boy:	44 cm x 72 cm
Ürün numarası ve ürün adı:	642 68 01 / TCmatt NEOmulti
	642 74 01 / TCmatt NEOsingle
Ağırlık:	0.21 kg



Ülkenizin dilindeki kullanım kılavuzunu online olarak burada bulabilirsiniz: www.service.tcm.gmbh/ifu/



Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiuate internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal
Deutschland
Tel.: +49 345 120 52 04
www.tcm.gmbh